

BTL-6000 LYMPHASTIM

Parametry techniczne



BTL-6000
Lymphastim 12 TOPLINE



BTL-6000
Lymphastim 12 EASY



BTL-6000
Lymphastim 6 EASY

Interfejs użytkownika	Kolorowy ekran dotykowy 5.7"	Wyświetlacz cyfrowy LED	Wyświetlacz cyfrowy LED
Liczba komór	12	12	6
Zakres ciśnienia	20 -160 mmHg	20 -160 mmHg	20 -160 mmHg
Gradient	0 -100% płynna regulacja	0, 10, 20, 30%	0, 10, 20, 30%
Gotowe programy zabiegowe	15	8	8
Encyklopedia	26 protokołów klinicznych (programy w sekwencjach)		
Programy użytkownika	100 programów definiowanych przez użytkownika		
Aplikatory (mankiety)	Nogi - 10 komór (prawa i lewa)	Nogi - 10 komór (prawa i lewa)	Nogi - 5 komór (prawa i lewa)
	Spodnie - 22 komory 2x nogi + pas (2 komory)	Spodnie - 22 komory 2x nogi + pas (2 komory)	Spodnie - 11 komór 2x nogi + pas (1 komora)
	Ręce - 8 komór (prawa i lewa)	Ręce - 8 komór (prawa i lewa)	Ręce - 6 komór (prawa i lewa)
Akcesoria	Pas poszerzający obwód aplikatora kończyny dolnej o 10 cm Stolik		



BTL Polska Sp. z o.o.
ul. Pytlańskiego 13
00-777 Warszawa
tel. 022 667 02 76, 882 42 51
fax 022 667 95 39
btlnet@btlnet.pl
www.btlnet.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone. Pomimo tego, że dokonaliśmy wszelkich starań, aby informacje o produktach były jak najbardziej dokładne i aktualne, nie ponosimy odpowiedzialności za błędy, które mogą pojawić się w tym katalogu. Produkty i ich parametry mogą ulec zmianie.

NOWOŚĆ

BTL-6000 LYMPHASTIM

APARATY DO MASAŻU UCISKOWEGO



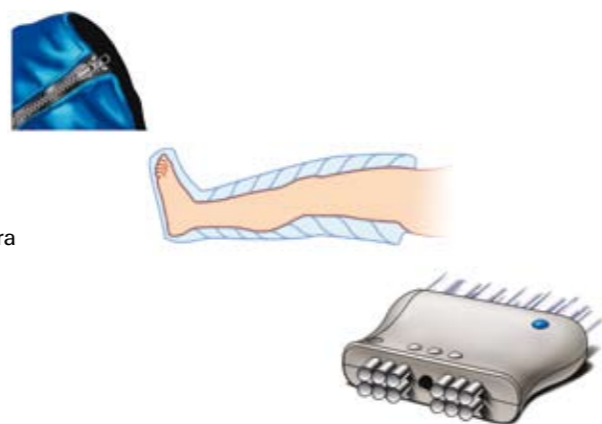
MASAŻ UCISKOWY

Układ limfatyczny jest odpowiedzialny za usuwanie płynu śródmiąższowego z tkanek. Absorbuje i transportuje kwasy tłuszczowe oraz tłuszcze do układu krążenia, a także przenosi komórki dostarczające antygen do węzłów chłonnych, gdzie stymulowana jest reakcja immunologiczna. Choroby układu limfatycznego oraz inne problemy z nim związane powodują zwykle obrzęki i inne objawy.

System Lymphastim firmy BTL działa na zasadzie sekwencyjnego masażu uciskowego. Specjalne aplikatory z zachodzącymi na siebie komorami zapewniają delikatny masaż, który pobudza naturalne krążenie limfy w organizmie w podobny sposób jak ręczny masaż uciskowy.

**WYSOKIEJ JAKOŚCI APLIKATORY, ŁATWE W UŻYCIU**

- ◇ Zamek błyskawiczny na całej długości aplikatora ułatwiający zakładanie
- ◇ Delikatniejsze i jednorodne zabiegi zapewnione przez nakładające się na siebie komory aplikatora
- ◇ Złącze ułatwiające szybką wymianę aplikatora
- ◇ Automatyczna identyfikacja aplikatorów
- ◇ Szeroka gama aplikatorów z możliwością powiększenia obwodu
- ◇ Higieniczne i łatwo zmywalne aplikatory
- ◇ Automatyczne opróżnianie aplikatora po zakończonym zabiegu
- ◇ Elektroniczny system kontroli ucisku

**BTL-6000 LYMPHASTIM 12 TOPLINE****12-komorowy aparat do masażu uciskowego:**

- ◇ Prosta obsługa
- ◇ Kolorowy ekran dotykowy 5,7"
- ◇ Encyklopedia z gotowymi protokołami zabiegowymi
- ◇ Gotowe sekwencje programów zabiegowych
- ◇ Możliwość tworzenia i zapisywania do 100 własnych programów użytkownika
- ◇ Zakres regulacji ciśnienia 20-160 mmHg z regulacją gradientu
- ◇ Niezależna regulacja ciśnienia dla każdej komory
- ◇ Regulacja prędkości nadmuchiwanie aplikatora
- ◇ Zaawansowane ustawienia parametrów indywidualnych terapii
- ◇ Cicha i niezawodna praca kompresora
- ◇ Parametry aktywności komór aplikatora widoczne na ekranie

**BTL-6000 LYMPHASTIM 12 EASY
BTL-6000 LYMPHASTIM 6 EASY****12-komorowy / 6-komorowy aparat do masażu uciskowego:**

- ◇ Prosta obsługa
- ◇ 8 gotowych programów zabiegowych
- ◇ Zakres regulacji ciśnienia 20-160 mmHg z regulacją gradientu
- ◇ Cicha i niezawodna praca kompresora
- ◇ Parametry aktywności komór aplikatora widoczne na histogramie
- ◇ Regulacja prędkości nadmuchiwanie aplikatora

**NAJCZĘSTSZE WSKAZANIA****Medycyna i rehabilitacja:**

- Przewlekłe obrzęki
- Niewydolność żył
- Opieka pourazowa
- Choroba zwyrodnieniowa stawów
- Zespół cieśni nadgarstka
- Angiopatia cukrzycowa
- Dna moczanowa
- Choroba niedokrwienia kończyn dolnych
- Algodystrofia
- Otyłość
- Leczenie słabo wyrażonej leukodystrofii metachromatycznej
- Zaburzenia troficzne skóry

Medycyna estetyczna i kosmetyka:

- Cellulit
- Zespół ciężkich nóg
- Zapobieganie powstawaniu żylaków
- Poprawa odżywienia skóry
- Obrzęk tłuszczowy
- Opieka po zabiegu liposukcji
- Rekonwalescencja
- Tenalgia
- Regeneracja
- Detoksykacja